

NÄYTTEENOTTO FOB-testiä varten

①

Kerää ulostenäyte puhtaaseen ja kuivaan muovi- tai lasisäiliöön tai vaihtoehtoisesti kaksin kerroin taitetulle WC-paperille.

②

Kierrä koeputken **SININEN** korkki auki ja ota näytetikku pois koeputkesta. Älä avaa valkoista päätä (se on tarkoitettu vain laboratoriohenkilöstölle).

③

Työnnä näytetikun **SININEN** pää useisiin eri kohtiin ulosteessa.






④

Poista liika uloste näytetikusta pyyhkimällä tikkua varovasti vessapaperilla. Jätä ulostetta vain uriin.

⑤

Laita näytetikku takaisin koeputkeen ja kierrä korkki kunnolla kiinni.

***Merkitse koeputkeen nimi, henkilötunnus ja näytteenoton päivämäärä.
Näyte on nyt valmis testattavaksi, ja sitä voidaan säilyttää huoneenlämmössä.
Näyte on testattava 7 vuorokauden kuluessa näytteenotosta.
Näytettä ei saa ottaa kuukautisten aikana tai silloin, jos verta voi joutua ulostenäytteeseen
vuotavista peräpukamista, eikä sitä saa ottaa virtsassa olevasta verestä***

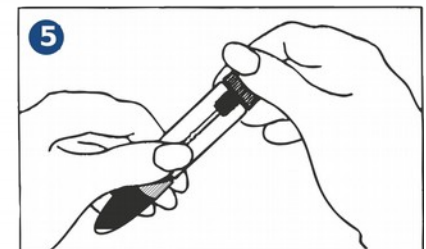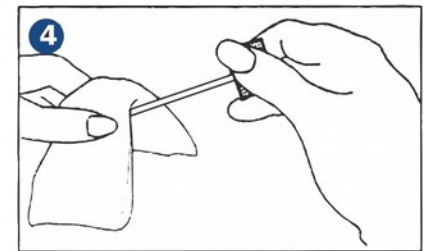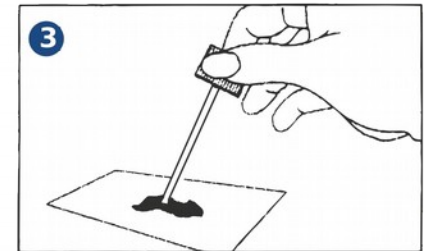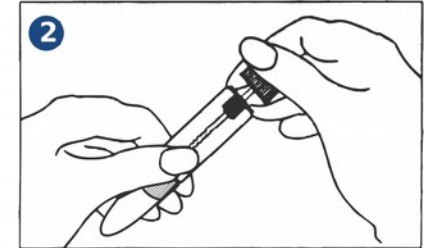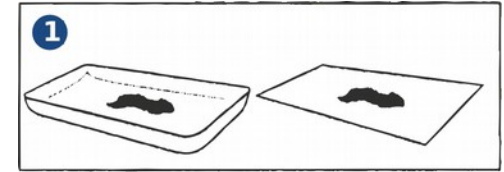

PROVINSAMLING av FOB Test






- 1 Samla provet i en ren och torr plast- eller glasbehållare eller alternativt på ett dubbelt veckat toalettpapper.
- 2 Skruva av den **BLÅ** korken på provröret och ta ut medföljande provpinne. Den vita änden ska förbli orörd (endast till för laboratoriepersonal)
- 3 Stoppa den **BLÅ** provpinnens ände på flera olika ställen av avföringen.
- 4 Torka bort överflödigt avföring från provpinnen genom att försiktigt stryka mot toalettpapper. Endast avföring i skårorna.
- 5 Sätt tillbaka provpinnen i röret och skruva åt ordentligt.

Märk röret med namn, personnummer och datum för provtagning.

Provet är nu klart för test och kan förvaras i rumstemperatur.

Provet ska testas inom 7 dagar från provtagning.

Det är viktigt att inte provtagning sker under menstruation, blödande hemorrojder eller blod i urinen.

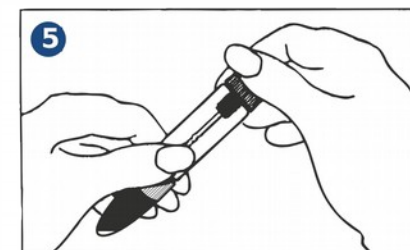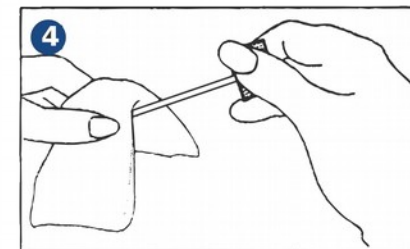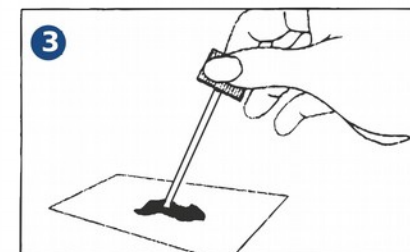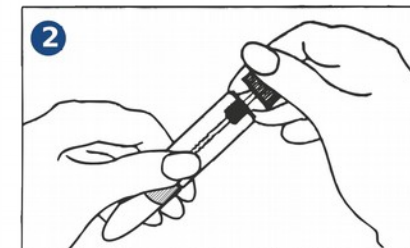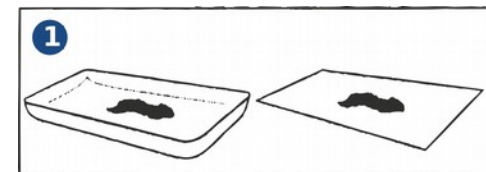

FOB Test SAMPLING

- ① Collect the sample into a clean and dry plastic or glass container or, alternatively, on a double folded toilet paper.
- ② Unscrew and remove the **BLUE** collection tube applicator stick. DO NOT remove the white cap.
- ③ Collect fecal samples by inserting the **BLUE** applicator stick into different sites of the feces.
- ④ Remove excess sample from the applicator stick by gently wiping with an absorbent tissue (toilet paper). Leave feces only in the grooves on the stick.
- ⑤ Put the applicator back into the tube and close the cap tightly.

**Mark the tube with name, person id and date when the sample was taken.
The specimen is now ready for testing, transportation and storage. The specimen can be stored in room temperature.
The sample should be tested within 1 week from sampling.
It is essential than samples are not taken during menstruation, bleeding hemorrhoids or with blood in the urine.**

